

GARETT Beauty Flash



IPL epilátor

NÁVOD K OBSLUZE CZ

O výrobku


Garett Beauty Flash je přístroj pro IPL fotoepilaci. Při tomto zákroku je používáno světlo k odstranění chloupků, a to jak světlých, tak i tmavých. Přístroj pro fotoepilaci rozpozná typ pokožky, hloubku a místo, tedy parametry, které ovlivňují účinnost zákroku.




Upozornění pro uživatele

- Před použitím tohoto výrobku si důkladně přečtěte návod a ponechte si jej pro použití v budoucnu.
- K napájení výrobku slouží přiložená napájecí sada.
- Nepoužívejte přístroj a neodpojujte jej od zásuvky mokřýma rukama.
- Napájecí kabel a přístroj neničte a neupravujte, protože tím můžete dojít k jeho poškození.
- Zabraňte zašpinění napájecího konektoru a napájecího kabelu.
- Dojde-li k poškození zástrčky nebo napájecího kabelu, nebo budou-li se při používání zahřívat, nepokračujte v používání zařízení.
- Používání příslušenství, které není přiloženo k výrobku, může být nebezpečné.
- Výrobek neuchovávejte v koupelně, na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Zabraňte kontaktu s vodou a silnými slunečními paprsky.
- Dojde-li k jeho poškození, ukončete jeho používání.
- Přístroj by neměli používat lidé během léčby, špatně se cítící, s podrážděnou, citlivou nebo zanícenou pokožku předtím, než se poradí s lékařem.
- Nedovolte dětem, aby používaly zařízení.


Fáze růstu chloupků

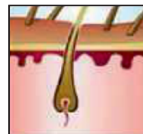

Fáze růstu chloupků: aktivní fáze růstu chloupků ve vlasovém váčku. Buňky cibulky se intenzivně dělí a tvoří nový chloupek.

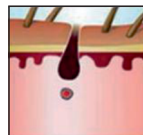

Fáze zániku chloupku: po konci fáze růstu chloupky přechází do fáze zániku. V této době dochází ke změnám stavby kořínku. Zaniká cibulka a chloupek je vytlačen na povrch pokožky.

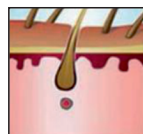

Fáze vypadávání chloupků: v této fázi jsou chloupky úplně zrohovatělé a nedochází v nich již k žádné látkové přeměně. Cibulka se stále ztenčuje, až nakonec při mytí nebo kartáčování vypadne, nebo ji vytlačí nový chloupek.

Plán epilace


Týden 1-2: Používejte 2krát týdně.

Týden 3-4: Používejte 1 týdně.

Týden 5-8: Používejte 1 za 2 týdny.

Týden 8+: Používejte 1 za 1-3 měsíce.

Pozor: Frekvenci používání lze měnit podle růstu chloupků. Interval volte podle individuálních potřeb. Používejte podle cyklu růstu chloupků.

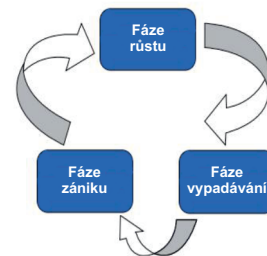

Průměrná délka zákroku	
Části těla	Délka zákroku
Ruce/paže	8-10 minut
Nohy	15 minut
Oblast bikin	2 minuty
Podpaždí/třísla	1 minuta

Volba intenzity světla

Před použitím přístroje zvolte opatrně a s rozmyslem intenzitu světla. Je doporučeno přístroj vyzkoušet (např. na noze) 48 hod. před plánovanou fotoepilací.

Pokud po provedené zkoušce nejsou patrné známky podráždění a nepocítujete žádný diskomfort, nic nebrání tomu, abyste realizovali celý zákrok.


Pozor: Intenzitu lampy volte podle typu pokožky.

Pozor: Životnost lampy do 500 tis. impulsů.



Typ pokožky	1	2	3	4	5	6
Intenzita (zkouška)	1	1	1	1	1	X
Intenzita (1. použití)	3	3	2	2	1	X
Běžná intenzita	4>5	4>5	3>4	3>4	2>3	X

Popis výrobku

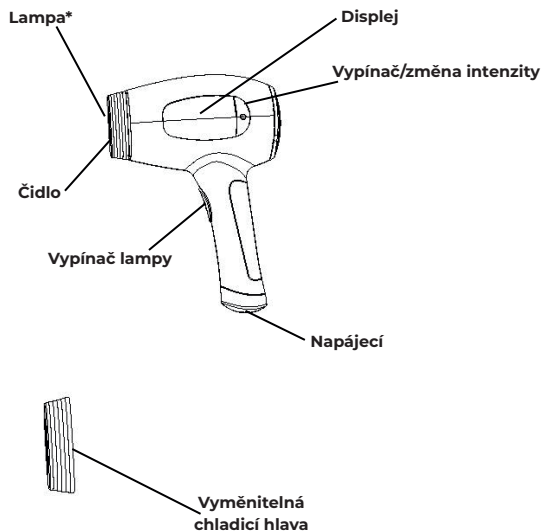

* Životnost lampy do 500 tis. impulsů.

Návod k použití

1. Před použitím tohoto výrobku si důkladně přečtete návod.
2. Pokud je pokožka silně ochlupená, před prvním zákrokem ji oholte.
3. Pokožku očistěte a zkontrolujte, zda na jejím povrchu nejsou zbytky chloupků, je zcela suchá a nejsou na ní mastné skvrny.
4. Zkontrolujte, že zařízení a okno lampy jsou čisté a správně nainstalované.
5. Dojde-li k dočasnému zastavení růstu chloupků (po 4-5 použitích zařízení), není potřeba pokožku holit.
6. V zimě nebo v případě suché pokožky ji nejdříve oholte a hydratujte. Po dalším dnu epilaci opakujte.
7. Po epilaci může být pokožka mírně načervenalá, což je normální jev. Je doporučeno použít obklad z ledu, jiných uklidňujících přípravků nebo chladicí hlavu zařízení.
8. **Při používání používejte ochranné brýle. Nedívejte se přímo do blikajícího světla. Nemiřte lampou do očí.**
9. Pokud není odstín vaší pokožky na kartě barev, zařízení nepoužívejte.
10. Je doporučené zařízení používat při teplotě okolí 10-30 °C. Pokud je teplota okolí vyšší než 30 °C, lidské tělo se potí, což může ztěžovat použití zařízení a snížit finální efekty.
11. Připojte zařízení ke zdroji a pak k napájení.
12. Zařízení zapněte podržením vypínače na cca 3 sekundy.
13. Po zapnutí uslyšíte běžící ventilátor a rozsvítí se displej.
14. Vypínačem nastavte požadovanou sílu podle typu vaší pokožky.
15. Pak nastavte epilátor tak, aby se jeho hlava celá dotýkala pokožky.
16. Stiskněte vypínač lampy a přidržíte zařízení na pokožce. Můžete pociťovat teplo a mravenčení.
17. Pohybuje epilátorem po epilované pokožce nahoru a dolů.

Pozor: Neodstraňujte chloupky 2krát na stejném místě během 10 sekund.

18. Pro vypnutí zařízení po ukončení zákroku stiskněte a 3 s přidržte vypínač a pak zařízení odpojte od napájení.

Pro demontáž či výměnu hlavy ji stiskněte dvěma prsty a lehce zatáhněte. Při opětovném nasazení vyrovnejte vnitřek hlavy a lehce zatlačte.

Nesprávné nasazení hlavy může vést k jejímu poškození a vadnému fungování zařízení.

Sposób użycia - krok po kroku



1. Oholte a očistěte pokožku.



2. Připojte k napájení.



3. Stiskněte vypínač na cca 3 sekundy.



4. Nastavte úroveň výkonu.



5. Nasadte si ochranné brýle.



6. Přiložte zařízení k pokožce, zapněte lampu a zahajte zákrok.

Pozor: Použití chladicí hlavy může snižovat začervení, které se může po zákroku objevit.

Záruka/Reklamacje

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. V případě reklamacje vyplňte přiložený záruční list a pošlete přístroj spolu s dokladem o koupi na adresu, která je v něm uvedena.

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách:

www.garett.eu


Výrobce:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce, Polsko

www.garett.eu

 Správná likvidace výrobku (opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů opadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.

