

## GARETT Beauty Fresh Skin Pro



Přístroj pro bezehličkovou

NÁVOD K OBSLUZE CZ

### O výrobku

**Garett Fresh Skin Pro** je moderní přístroj pro mezoterapii, který využívá technologii RF, EMS, terapii pomocí LED světla, inovativní čištění pleti a sonické vibrace. Speciální technologie studeného obkladu umožňuje zmírnit a uklidnit podráždění a odpočívat po zákroku.

**Funkce RF radiofrekvence:** je typ terapie, která využívá elektromagnetické záření s frekvencí radiových vln. Zlepšuje stav pleti, stimuluje regeneraci kolagenu ve vrstvě pokožky a obnovuje pružnost a lesk pokožky.

**Funkce iontového čištění:** metoda využívající export iontů za účelem odstraňování z pokožky škodlivých látek, iontů nebo mikroorganismů. Má kladný vliv na krevní oběh, obnovuje pružnost a lesk pokožky.

**Funkce iontové hydratace:** pomáhá hydratovat pleť, má pozitivní vliv na pokožku a příjem kondicionérů a kosmetických přípravků.

**Funkce EMS elektrostimulace:** je terapie, která využívání pulzní proud s nízkou frekvencí. Zpevnění svalů obličeje. Zlepšuje krevní oběh, zásobuje svaly kyslíkem a vede k odstranění nadbytečných metabolických produktů.


**Funkce LED terapie:** metoda využívající světlo červené barvy. Obnovuje pružnost pokožky, stimuluje činnost kolagenu a odstraňuje drobné vrásky.

**Funkce studeného obkladu:** pomáhá redukovat, zmírňovat a uklidňovat podráždění. Nízká teplota může sloužit také pro relaxační uvolňující masáže po zákroku.

### Upozornění pro uživatele

- Před použitím tohoto výrobku si důkladně přečtěte návod a ponechte si jej pro použití v budoucnu.
- K nabíjení používejte přiloženou nabíjecí sadu.
- Během nabíjení je zakázáno výrobek používat.
- Výrobek není vodovzdorný, neponořujte jej do vody.
- Neodpojujte zařízení od zásuvky ani jej nepoužívejte s mokřýma rukama.
- Pro zabránění úrazům se nedotýkejte kovové části zástrčky.
- Napájecí kabel neničte, neupravujte, neohýbejte a nezkrucujte, protože tím můžete dojít k jeho poškození.
- Zabraňte zašpinění nabíjecího konektoru a napájecího kabelu.
- Dojde-li k poškození zástrčky nebo napájecího kabelu, nebo budou-li se při nabíjení zahřívat, ukončete nabíjení.
- Zařízení čistěte, aby nedošlo k nahromadění prachu a nečistot.
- Výrobek neuchovávejte v koupelně, na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Nepoškozujte výrobek, neházejte jím a neupravujte jej. Dojde-li k jeho poškození, ukončete jeho používání.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti podrážděné, citlivé nebo zanícené pokožky. V takovém případě se obraťte na lékaře.
- Nedovolte dětem, aby používaly zařízení.
- Těhotné ženy a ženy během periody by neměly výrobek používat dříve, než se poradí s lékařem.

### Popis výrobku

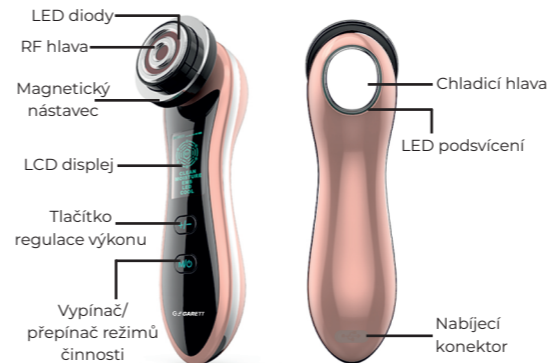

### Režimy činnosti

**Režim činnosti:** RF  
**Charakteristika:** Zahřívá pokožku, otevírá póry  
**Využívané funkce:** RF  
**Odličovací plátek:** Ne  
**Doporučovaná kosmetika:** Mycí přípravky, přípravky pro péči o pleť  
**Délka zákroku:** Cca 5 minut  
**Úroveň intenzity:** 5  
**Frekvence provádění:** 2-3krát týdně

**Režim činnosti:** CLEAN  
**Charakteristika:** Ohřívá pokožku, zesvětluje a očišťuje pleť  
**Využívané funkce:** RF + iontové čištění + vibrace  
**Odličovací plátek:** Ano  
**Doporučovaná kosmetika:** Odličovací a mycí přípravky.  
**Délka zákroku:** Cca 5 minut  
**Úroveň intenzity:** 5  
**Frekvence provádění:** 2-3krát týdně

**Režim činnosti:** MOISTURE  
**Charakteristika:** Zahřívá pokožku, podporuje hydrataci pleti a příjem kondicionérů a kosmetických přípravků  
**Používané funkce:** RF + EMS + iontová hydratace + vibrace  
**Odličovací plátek:** Ano  
**Doporučovaná kosmetika:** Přípravky pro hydrataci/péči, mytí pleti, vyživující přípravky, jako jsou pleťové masky (při používání masek není potřeba instalovat kosmetický plátek)  
**Délka zákroku:** Cca 5 minut  
**Úroveň intenzity:** 5  
**Frekvence provádění:** 2-3krát týdně

**Režim činnosti:** EMS UP  
**Charakteristika:** Zahřívá pokožku, stimuluje činnost svalů obličeje. Zvyšuje pružnost a pevnost pleti. Možnost provést zákrok na krku a ramenou  
**Využívané funkce:** RF + EMS  
**Odličovací plátek:** Ano  
**Doporučovaná kosmetika:** Přípravky pro péči a vyživování pleti  
**Délka zákroku:** Cca 5 minut  
**Úroveň intenzity:** 5  
**Frekvence provádění:** 2-3krát týdně

**Režim činnosti:** RF LED  
**Charakteristika:** Zahřívá pokožku, zlepšuje stav pleti, podporuje krevní oběh  
**Využívané funkce:** RF + LED  
**Odličovací plátek:** Ne  
**Doporučovaná kosmetika:** Přípravky pro péči, vyživování a hydrataci pleti  
**Délka zákroku:** Cca 5 minut  
**Úroveň intenzity:** není k dispozici  
**Frekvence provádění:** 2-3krát týdně

**Režim činnosti:** COOL  
**Charakteristika:** Díky nízké teplotě ochlazuje pokožku, zmírňuje podráždění. Zvyšuje pružnost a uklidňuje podrážděnou pleť  
**Využívané funkce:** Studený obklad  
**Odličovací plátek:** Ne  
**Doporučovaná kosmetika:** Přípravky pro péči, vyživování a hydrataci pleti  
**Délka zákroku:** Cca 5 minut  
**Úroveň intenzity:** není k dispozici  
**Frekvence používání:** Denně

### Kosmetický plátek

- Odstraňte magnetický nástavec z přístroje.

**Pozor:** Ochrana je namontovaná na magnetu na zařízení. Pro demontáž zatáhněte za kroužek k sobě.

- Nasadte vatový tampon na elektrodu a jemně ho zatlačte do otvoru hlavy.

**Pozor:** V případě silných kosmetických plátek se mohou pocíty při zákroku lišit.



3. Navlhčete vatový tampon odličovacími, kosmetickými nebo vyživujícími přípravky, podle režimu činnosti. Pak nasadte dříve odstraněnou ochranu.

4. Pro správné instalaci je zařízení připravené k činnosti.

**Pozor:** Po zákroku vyčistěte pokožku a zařízení. Výrobek není vodovzdorný, nemyjte jej vodou.

### Návod k použití

1. Před prvním použitím zkontrolujte, zda je zařízení nabitě.
2. Pokud nebude reagovat na vypínač, připojte je k nabíjení.
3. Úplné nabití baterie vybitého zařízení trvá asi 2,5 hodiny.
4. Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte vypínač **M/ON** na asi 3 sekundy. Zařízení začne pracovat v implicitním režimu – RF. Zapnutí zařízení je signalizováno podsvícením tlačítek a zvukovým signálem.
5. Jedním stiskem tlačítka **M/ON** přepnete režim činnosti (6 dostupných režimů) na požadovaný. Změna režimů je signalizovaná zvukovým signálem.
6. Podle individuálních potřeb lze zvýšit/snížit výkon zařízení (5 úrovní výkonu) tlačítkem pro regulaci výkonu. Implicitně je zařízení na nejnižší úrovni.
7. Nasadte kosmetický plátek na hlavu, aplikujte kosmetický přípravek podle vašich potřeb a zahajte zákrok.
8. Pohybuje zařízením zevnitř vně a zespoda nahoru a držte zařízení v blízkosti cílového místa.
9. Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko **M/ON** na asi 3 sekundy. Vypnutí zařízení je signalizováno dvojitým zvukovým signálem.
10. Po dokončení zákroku vyčistěte pokožku a zařízení.

**Pozor:** Zařízení má funkci automatického vypnutí po 5 minutách bez aktivity uživatele.

### Postup použití

1. Vyčistěte a osušte pokožku.

2. Podle vybraného režimu činnosti:

\* naneste rovnoměrně pleťové přípravky na obličej,

\* naneste přípravky pro odličování/kosmetické přípravky na vatový tampon, který je pod magnetickým nástavcem.

**Pozor:** Režim **COOL** lze používat také s kosmetikou pro fixaci make-upu.

3. Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko **M/ON** na cca 3 sekundy.

4. Stejným tlačítkem zvolte požadovaný režim.

5. Zvolte intenzitu činnosti zařízení tlačítkem **+/-**.

**Pozor:** Při prvním použití výrobku je doporučeno nastavit úroveň 1, aby si pokožka zvykla na zákroky. Zabránění vzniku případných podrážžení.

6. Pohybuje zařízením zevnitř vně a zespoda nahoru a držte zařízení v blízkosti cílového místa tak, aby se hlava dotýkala povrchu pokožky.

7. Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko **M/ON** na asi 3 sekundy.

8. Po dokončení zákroku opět sundejte magnetický nástavec a vyjměte vatový tampon. Vyčistěte zařízení a nasadte nástavec.

9. Odstraňte z pokožky zbytky kosmetických přípravků.

10. Pokud budete pociťovat diskomfort, použijte režim **COOL** pro zmírnění podráždění a odpočinek po zákroku.

### \* Režim EMS UP, MOISTURE



➤ Při zákroku pohybuje zařízením podle šipek na obrázku.

● Zařízení nepoužívejte na následující části těla. Pouze v režimu COOL je povolen zákrok v oblasti očí (dotýkat se víček). Před zahájením zavřete oči.

### \* Režim RF, CLEAN, RF LED



➤ Při zákroku pohybuje zařízením podle šipek na obrázku.

● Zařízení nepoužívejte na následující části těla. Pouze v režimu COOL je povolen zákrok v oblasti očí (dotýkat se víček). Před zahájením zavřete oči.

● V LED režimu je povolen zákrok v oblasti očí, pod podmínkou, že oči zavřete a budete držet zařízení ve vzdálenosti alespoň 5 cm od pokožky.

### Opravy a údržba

1. Dojde-li k poškození nebo poruše výrobku, přerušte jeho používání a obraťte se na servis firmy Garrett.
2. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
3. Zařízení není vodovzdorné. Nemyjte ho vodou, aby nedošlo k jeho poškození.
4. Pokud nebude zařízení používáno delší dobu, je doporučeno jej nabít alespoň 1-2krát za měsíc a uskladnit v suchu a chladu, aby se prodloužila jeho životnost.

### Technická specifikace

Název výrobku: Garrett Beauty Fresh Skin Pro	
Kapacita baterie: 1200 mAh	Frekvence vibrací: 10-30 Hz
Délka nabíjení: cca 2,5 hod.	Teplota: 6-38°C (+/-5)
Hmotnost: 298 g	Rozměry: 18,7 x 5,1 x 6,3 cm

**Více informací o tomto zařízení naleznete na stránkách [www.garett.eu](http://www.garett.eu). Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte stránky [www.garett.eu](http://www.garett.eu).**

### Záruka/Reklamacce

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. V případě reklamacce vyplňte příložený záruční list a pošlete přístroj spolu s dokladem o koupi na adresu, která je v něm uvedena.

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách:

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

#### Výrobce:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński  
ul. Targowa 18/1413  
25-520 Kielce, Polsko  
[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

✂ Správná likvidace výrobku  
(opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů opadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.

