

GARETT Beauty Fresh Skin Pro



Zariadenie na bezihlovú
mezoterapiu

NÁVOD NA POUŽITIE SK

O výrobku

Garett Fresh Skin Pro je najmodernejší mezoterapeutický prístroj, ktorý využíva technológiu RF, EMS, svetelnú terapiu LED, inovatívne čistenie pokožky a sonické vibrácie. Špeciálna technológia studených obkladov umožňuje upokojenie a zmiernenie podráždenia alebo odpočinku po ošetrení.

Rádiofrekvenčná funkcia je typ terapie využívajúci elektromagnetické žiarenie s rádiovou frekvenciou. Zlepšuje stav pleti, stimuluje regeneráciu kolagénu v kožnej vrstve, obnovuje pružnosť a žiarivosť pokožky.

Funkcia iónového čistenia: metóda využívajúca export iónov na čistenie pokožky od škodlivých látok, iónov kovov a mikroorganizmov. Má pozitívny vplyv na krvný obeh, obnovuje pružnosť a žiarivosť pokožky.

Iónová hydratačná funkcia: pomáha zvlhčovať pleť, pozitívne pôsobí na epidermis a pomáha vstrebávať kondicionéry a kozmetické tekutiny.

Elektrostimulačná funkcia EMS: terapia pomocou nízko-frekvenčného pulzného prúdu. Spevňuje svaly tváre. Zlepšuje krvný obeh, zásobovanie svalov kyslíkom a vedie k odstráneniu nepotrebných produktov metabolizmu.


Funkcia LED terapie: metóda využívajúca červené svetlo. Obnovuje pružnosť pokožky, stimuluje kolagén a odstraňuje jemné linky a vrásky.

Funkcia studeného obkladu: pomáha znižovať, upokojovať a zmiernovať podráždenie. Nízka teplota môže slúžiť aj ako relaxačná masáž na uvoľnenie po ošetrení.

Pokyny pre používateľov

1. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
2. Výrobok sa nabíja pomocou dodanej nabíjacej súpravy.
3. Počas nabíjania je zakázané používať tento výrobok.
4. Výrobok nie je vodotesný a nemal by sa ponárať do vody.
5. Nepokúšajte sa odpojiť zariadenie zo zásuvky ani ho nepoužívajte s mokrymi rukami.
6. Aby ste predišli nehodám, nedotýkajte sa kovovej časti zástrčky.
7. Napájací kábel nepoškodzuje, neupravujte, neohýbajte ani nekrúťte - môže dôjsť k jeho poškodeniu.
8. Zabráňte znečisteniu nabíjacieho portu a napájacieho kábla.
9. Ak je zástrčka alebo napájací kábel poškodený alebo sa počas nabíjania zahrieva, prestaňte nabíjať.
10. Zariadenie čistite, aby sa na ňom nehromadil prach a nečistoty.
11. Výrobok neskladujte v kúpeľni, na vlhkých miestach, pri vysokej teplote, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
12. Výrobok neničte, nevyhadzujte ani neupravujte. Ak je poškodený, prestaňte ho používať.
13. Prístroj nepoužívajte v blízkosti podráždenej, alergickej alebo zapálenej pokožky. Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára.
14. Nedovoľte deťom používať zariadenie.
15. Ženy, ktoré sú tehotné alebo počas menštruačného cyklu, by nemali výrobok používať bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

Popis produktu

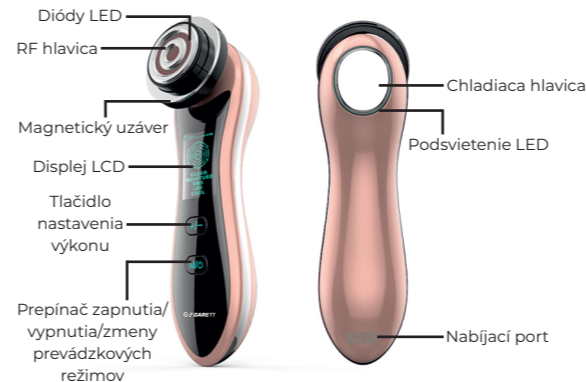

Režimy prevádzky

Prevádzkový režim: RF

Vlastnosti: zahrieva pokožku, otvára póry

Používané funkcie: RF

Inštalácia odličovacej podložky: Nie

Odporúčaná kozmetika: Čistiace prostriedky, starostlivosť o tvár

Čas ošetrenia: cca 5 minút

Úroveň intenzity: 5

Frekvencia cvičenia: 2-3 krát týždenne

Prevádzkový režim: CLEAN

Vlastnosti: zahrieva pokožku, rozjasňuje a čistí pleť

Používané funkcie: RF + iónové čistenie + vibrácie

Inštalácia odličovacej podložky: Áno

Odporúčaná kozmetika: Odličovač, umývanie tváre

Čas ošetrenia: cca 5 minút

Úroveň intenzity: 5

Frekvencia cvičenia: 2-3 krát týždenne

Režim prevádzky: MOISTURE

Vlastnosti: zahrieva pokožku, pomáha hydratovať pokožku a pôsobí na vstrebávanie kondicionérov a kozmetických tekutín

Používané funkcie: RF + EMS + iónová hydratácia + vibrácie

Inštalácia odličovacej podložky: Áno

Odporúčaná kozmetika: Hydratačné prípravky/kondicionéry, čistiace prípravky na tvár alebo výživné látky vo forme pletovej masky (ak používate masky, nie je potrebné použiť vatový tampón)

Čas ošetrenia: cca 5 minút

Úroveň intenzity: 5

Frekvencia cvičenia: 2-3 krát týždenne

Režim prevádzky: EMS UP

Vlastnosti: Zahrieva pokožku, stimuluje tvárové svaly. Pokožka je vďaka nemu pružnejšia a pevnejšia. Možnosť ošetrenia krku a ramien

Používané funkcie: RF + EMS

Inštalácia odličovacej podložky: Áno

Odporúčaná kozmetika: Starostlivosť o pleť, produkty na ošetrenie pleti

Čas ošetrenia: cca 5 minút

Úroveň intenzity: 5

Frekvencia cvičenia: 2-3 krát týždenne

Prevádzkový režim: RF LED

Charakteristika: zahrieva pokožku, zlepšuje stav pokožky, podporuje krvný obeh

Používané funkcie: RF + LED

Inštalácia odličovacej podložky: Nie

Odporúčaná kozmetika: Starostlivosť o pleť, výživné a hydratačné produkty

Čas ošetrenia: cca 5 minút

Úroveň intenzity: žiadna

Frekvencia cvičenia: 2-3 krát týždenne

Prevádzkový režim: COOL

Charakteristika: Vďaka nízkej teplote chladí pokožku, upokojuje podráždenie. Upokojuje a mierni podráždenú pokožku

Používané funkcie: Studený obklad

Inštalácia odličovacej podložky: Nie

Odporúčaná kozmetika: Starostlivosť o pleť, výživné a hydratačné produkty

Čas ošetrenia: cca 5 minút

Úroveň intenzity: žiadna

Frekvencia vykonávania: Denne

Inštalácia kozmetickej podložky

1. Odstráňte magnetický kryt zo zariadenia.

Poznámka: Bezpečnostné zariadenie je namontované na magnet umiestnený v zariadení. Ak ho chcete odstrániť, potiahnite ráfik smerom k sebe.

2. Na povrch elektródy priložte vatový tampón a jemne ho zatlačte do otvoru hlavice.

Poznámka: Pri hrubých kozmetických vankúšikoch sa môže pocit počas ošetrenia líšiť.



3. Navlhčite vatový tampón odličovacím prípravkom/kozmetikou alebo kondicionérom - v závislosti od vášho režimu. Potom nasadte ochranu, ktorú ste predtým odstránili.

4. Po správnej inštalácii je jednotka plne funkčná.

Poznámka: Po ošetroaní očistite pokožku a prístroj. Výrobok nie je vodotesný a nemal by sa umývať vodou.

Návod na použitie

1. Pred prvým použitím sa uistite, že je zariadenie nabité.
2. Ak na tlačidlo napájania nereaguje, pripojte zariadenie k nabíjačke.
3. Keď je zariadenie vybité, úplné nabitie batérie trvá približne 2,5 hodiny.
4. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **M/Ů** približne 3 sekundy. Zariadenie sa spustí v predvolenom režime - RF. Spustenie bude signalizované rozsvietením tlačidiel a zvukovým signálom.
5. Jedným stlačením tlačidla **M/Ů** môžete zmeniť prevádzkový režim (k dispozícii 6) tak, aby vyhovoval vašim individuálnym potrebám. Zmena režimu je signalizovaná pípnutím.
6. V závislosti od vašich osobných potrieb môžete zvýšiť/znížiť výkon jednotky (5 úrovní výkonu) pomocou tlačidla na nastavenie výkonu V predvolenom nastavení jednotka pracuje na najnižšej úrovni.
7. Na hlavu položte vatový tampón, naneste kozmetický prípravok vybraný podľa vašich potrieb a začnite ošetrovanie.
8. Pohybuje zariadením zvnútra von a zdola nahor, pričom zariadenie držte v blízkosti cieľovej oblasti.
9. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **M/Ů** približne 3 sekundy. Vypnutie bude signalizované dvojitým pípnutím.
10. Po ošetroaní očistite pokožku a zariadenie.

Poznámka: Zariadenie má funkciu automatického vypnutia po 5 minútach bez zásahu používateľa.

Návod na použitie krok za krokom

1. Očistite a osušte pokožku.

2. V závislosti od zvoleného prevádzkového režimu:

* Rovnomerne naneste produkty starostlivosti o pleť na tvár;

* Na vatový tampón umiestnený pod magnetickým uzáverom naneste prípravok na odstránenie make-upu/kozmetické prípravky.

Poznámka: Režim **COOL** možno použiť aj s kozmetikou na zlepšenie trvanlivosti make-upu.

3. Stlačením a podržaním tlačidla **M/Ů** na približne 3 sekundy zapnete prístroj.

4. Pomocou rovnakého tlačidla vyberte príslušný režim.

5. Pomocou tlačidla **+/-** nastavte intenzitu zariadenia.

Poznámka: Pri prvom použití výrobku sa odporúča zvoliť úroveň 1, aby si pokožka na ošetrovanie zvykla. Predídete tak možnému podráždeniu.

6. Pohybuje zariadením zvnútra von a zdola nahor, pričom zariadenie držte blízko cieľovej oblasti tak, aby sa hlava dotýkala povrchu kože.

7. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **M/Ů** približne 3 sekundy.

8. Po skončení liečby opäť odstráňte magnetický uzáver a vyberte vatový tampón. Jednotku dôkladne vyčistite a nasadte uzáver.

9. Očistite pokožku od zvyškov kozmetických prípravkov.

10. Ak sa cítite nepríjemne, použite režim **COOL** na zmiernenie podráždenia alebo relaxáciu po ošetroaní.

* Režim EMS UP, MOISTURE



Ošetrovanie vykonajte pohybom zariadenia podľa šípok na obrázku.

Nepoužívajte zariadenie na týchto častiach tela. Iba v režime COOL je povolené ošetrovať oblasť očí (dotýkať sa očných viečok). Pred začatím zavrite oči.

* Režim RF, CLEAN, RF LED



Ošetrovanie vykonajte pohybom zariadenia podľa šípok na obrázku.

Nepoužívajte zariadenie na týchto častiach tela. Iba v režime COOL je povolené ošetrovať oblasť očí (dotýkať sa očných viečok). Pred začatím zavrite oči.

V režime LED je povolené ošetrovanie v oblasti očí za predpokladu, že sú oči zatvorené a prístroj sa drží vo vzdialenosti najmenej 5 cm od pokožky.

Opravy a údržba

1. V prípade poškodenia alebo poruchy prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett.
2. V prípade poškodenia, je potrebné produkt odovzdať do autorizovaného servisu pre jeho kontrolu/opravu.
3. Zariadenie nie je vodotesné. Aby ste zabránili poškodeniu, neumývajte ho vodou.
4. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odporúčame ho nabíjať aspoň 1 až 2-krát za mesiac a skladovať ho na suchom a chladnom mieste, aby sa predĺžila jeho životnosť.

Technické špecifikácie

Názov produktu: Garrett Beauty Fresh Skin Pro	
Kapacita batérie: 1200 mAh	Frekvencia vibrácií: 10-30 Hz
Čas nabíjania: cca 2,5 hodiny	Teplota: 6-38 °C (+/-5)
Hmotnosť: 298 g	Rozmery: 187 x 51 x 63 mm

Viac informácií o tomto zariadení nájdete na adrese www.garett.eu. Navštívte webovú stránku www.garett.eu a pozrite si ďalšie výrobky a príslušenstvo.

Záruka/reklamácie


Na produkt sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia spôsobené chybou používateľa alebo nesprávnym používaním (nezlučiteľným s určeným použitím), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného ako dodaného príslušenstva, spotrebného materiálu. Pre reklamáciu produktu vyplňte záručný list, ktorý je priložený k zariadeniu a odošlite zariadenia spolu s dokladom o nákupe na adresu servisu uvedenú na záručnom liste.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na stránke:

www.garett.eu

Výrobca:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce
www.garett.eu

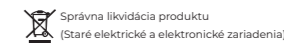

Toto označenie umiestnené na produkte, alebo v textoch, ktoré sa naň vzťahujú poukazuje na to, že po skončení životnosti by sa tento produkt nemal likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste predišli možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu prejavovať ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom oddeľte výrobok od ostatných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili propagáciu opätovného použitia materiálnych zdrojov ako bežnú prax. Informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok ekologickým spôsobom, môžu používatelia v domácnostiach získať od predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo od miestneho úradu. Priemyselný používateľia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.

