

# GARETT

## Beauty Pure Skin



**Přístroj pro mikrodermální abrazi**

**NÁVOD K OBSLUZE CZ**

### Úvod

Garett Beauty Pure Skin je multifunkční kosmetický přístroj. Účinně zpevňuje pokožku, čistí póry, odstraňuje akné a pupínky. Podtlakem jemně masíruje pokožku, která se tak stává pevnější a hladší.


### Podtlakové sání

Unikátní systém podtlakového sání může pozvedávat a masírovat pleť, a tím zvyšovat účinnost vstřebávání kosmetických přípravků, které pronikají hluboko do tkáně a zlepšují její stav. Teplý obklad na obličej udržuje pokožku pevnou a pružnou.

### Popis výrobku



### Detaily displeje

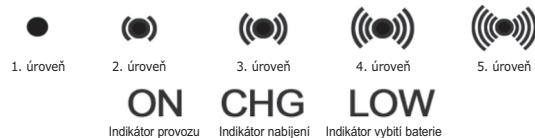

### Postup použití

#### 1. Teplý obklad obličej

Dejte si na obličej horký ručník nebo použijte napařovací přístroj na obličej 3-5 minut, aby se otevřely póry.

#### 2. Použijte čisticí přípravek na pupínky

Namočte vatový tampon do přípravku na pupínky a dejte jej na nos na 3-5 minut.

#### 3. Zvolte vhodný režim

Zvolte režim, který bude pro vaši pokožku nejvhodnější.

#### 4. Odstraňte pupínky

Zapněte sání v oblasti pupínků a pomalu pohybujte sacím nástavcem po pokožce. (1-2 minuty). Při odsávání pupínků nadržte sací hlavou na jednom místě.

#### 5. Omyjte obličej vodou

Po odsání pupínků omyjte obličej vodou.

#### 6. Ošetřete obličej

Použijte masku stahující póry nebo hydratační masku.

### Nástavce

#### Nástavec s malým kulatým otvorem.

Vlastnosti: Je vhodný pro odstraňování pupínků pomocí mírného sání. Je vhodný pro slabou, jemnou nebo přecitlivělou pokožku. **Nepoužívejte malý nástavec v režimu silného sání.**

#### Vlastnosti: Je vhodný pro odstraňování

Vlastnosti: Je vhodný pro většinu typů pokožky.

#### Nástavec s velkým kulatým otvorem.

Vlastnosti: Pomocí režimu silného sání lze odstraňovat pupínky z oblasti obličeje ve tvaru písmena V. Při odsávání pupínků nadržte sací hlavu na jednom místě. Pro dosažení nejvyšší účinnosti pohybujte sací hlavou po obličejí zdola nahoru.

#### Oválný nástavec.

Vlastnosti: Je vhodný hlavně pro vyhlazování vrásek. Pomáhá prokřít pokožku a zvyšuje její pružnost.

## Upozornění a pokyny

- Nastavení příliš velké síly sání a používání sacího nástavce na jednom místě po příliš dlouhou dobu může způsobit začervenání, které vymizí za několik hodin.
- Funkce zpevňování pokožky má liftingující účinky. Nepoužívejte na pokožku s poraněními a jizvami.
- Netlačte sací hlavou na pokožku. Přístroj dosahuje vysoký sací výkon.
- Po zákroku se může na povrchu pokožku objevit mírné začervenání, což je způsobeno cévami v pokožce. Jedná se o zcela normální reakci pokožky, která vymizí za asi 30 minut.
- Po ukončení zákroku pokožku hydratujte.
- Před ani po zákroku nepoužívejte peeling ani jiné obdobné přípravky.

## Způsob použití

### Odstraňování pupíků

Zvolte sací nástavec a výkon zařízení podle potřeb. Při používání přístroje k odsávání pupíků pomalu pohybujte sací hlavou po pokožce v místě jejich výskytu. Projedte sací hlavou toto místo několikrát. Důležité je pohybovat hlavou jedním směrem a odtahovat ji od pokožky ihned po odsání.

## Liftingová masáž

Vyměňte nástavec hlavy za oválný. Uchopte přístroj do ruky a zvolte vhodný režim. Přiložte nástavec k pokožce a pak ho rychle odtáhněte a znovu přiložte. Zopakujte tento postup víckrát, aby došlo k lepšímu prokrvení pokožky. Díky tomu se zvýší její pružnost a dojde k zabránění vzniku vrásek. Neodsávejte stále stejné místo. To může způsobit podráždění pokožky, která zčervená nebo zfaloví. V takovém případě přestaňte přístroj používat.

### Parametry výrobku

Název produktu: Garrett Beauty Pure Skin	
Kapacita baterie: 450 mAh	Doba provozu: 90 minut
5 poziomów mocy ssania	Hmotnost netto: 133 g
Napětí: 5 V == 1A	Výkon: 3 W
Rozměry: 173 x 44 x 40 mm	

## Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím se ujistěte, že houbový filtr je správně umístěn v hlavě. Houba musí být suchá.
2. Přístroj nemyjte proudem vody.
3. Nepoužívejte přístroj v následujících případech:
  - Dermatologická léčba.
  - Výskyt bulek (např. maligních) na pokožce.
  - Těhotné a kojící ženy.
  - Děti mladší 12 let.
  - Lidé s infekčním onemocněním.
4. V případě poškození krytu, mechanické nebo elektrické poruchy přestaňte přístroj používat a obraťte se na výrobce.
5. Uchovávejte přístroj v suchu.

## Záruka/Reklama

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. V případě reklama vyplňte přiložený záruční list a pošlete přístroj spolu s dokladem o koupi na adresu, která je v něm uvedena.

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách:

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

### Výrobce:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413


25-520 Kielce, Polsko

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



Správná likvidace výrobku  
(opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.

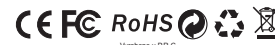

Vyrobena v P.R.C.