


GARETT

Beauty True Scrub

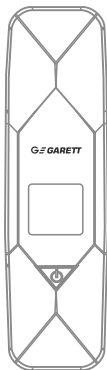

Kavitációs hámlasztó készülék

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

A termékről

A rozsdamentes acél spatula mikroáramokkal és nagyfrekvenciás rezgésekkel hat az arcra. A készülék eltávolítja a szennyeződések a bőr külső felületéről, tisztítja a pórusokat és segít simítani a bőrt.

Ultrahangos ion rezgések

A percenként 20-30 kHz-es ultrahangos rezgések segítenek eltávolítani a pórusok mélyén lévő szennyeződések, ezáltal fényesebbé és tisztábbá téve a bőrt.

Megjegyzések a termék használata előtt

1. Ne tartsa a készüléket hosszú ideig az arcán egy helyen. Lassan mozgassa a készüléket az arcán.
2. Ha az arcbőr gyulladt, csak a gyulladás megszűnése után használja a készüléket.
3. A készüléket hetente 1-2 alkalommal ajánlott használni. Ne használja a készüléket naponta többször.
4. Használat közben tartsa tisztán a rozsdamentes acél spatulát és a készülék házát.
5. Használat közben ügyeljen arra, hogy megfelelően tartsa a kezét az ionérzékelő területén.

Útmutató lépésről lépésre



1. LÉPÉS

Melegítse fel arcát forró törülközővel vagy gőzmelegítővel 3-5 percig, hogy kinyissa a pórusokat.



2. LÉPÉS

Tisztítsa meg arcát vízzel vagy tisztítószerral.



3. LÉPÉS

Kapcsolja be a készüléket, és váltson a személyes igényeinek megfelelő üzemmódra.



4. LÉPÉS

Lassan mozgassa a készüléket az arcán a mitesszerek eltávolításához.



5. LÉPÉS

A kezelés befejezése után mossa le arcát vízzel.



6. LÉPÉS

Használjon hűtő borogatást, vagy vigyen fel hidratáló maszkot a pórusok összehúzására.

Használattal kapcsolatos utasítás

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 1,5 másodpercig a gombot. Az alapértelmezett az ultrahangos üzemmód. Újbóli megnyomása erősebb ultrahang módba vált. Az üzemmóvváltási információk mód ikonként jelennek meg az LCD-képernyőn.
2. Nyomja meg ismét a gombot, hogy belépjen a pozitív ionok kék fényrel való exportálási módjába.
3. Nyomja meg ismét a gombot, hogy belépjen a negatív ionok piros fényrel való importálási módjába.
4. Nyomja meg ismét az EMS ultrahangos módba való belépéshez.
5. Nyomja meg újra a gombot az első üzemmódba való belépéshez, és tartsa lenyomva 1,5 másodpercig bármely üzemmódban a készülék kikapcsolásához.


1/2 mód - Bőrtisztítás (L/H):

- Vigyen fel arcmosó készítményt vagy tiszta vizet a mosott arcra, és kezdje meg a kezelést.
- Lassan mozgassa az arc tisztítandó körvonalai mentén.
- Ne feledje, hogy a spatulát lefelé, a pórusok irányával ellentétesen kell megdönteni.
- A kezelésnek körülbelül 10 percig kell tartania. Ha végzett, tisztítsa meg bőrét tiszta vízzel.



3/4 mód - ionterápia (negatív ion- / pozitív ion+):

- Alapvető használat esetén tisztítsa meg arcát gőzölővel, vagy helyezzen fel meleg törülközőt 5 percre.
- Vigyen fel tápláló olajat az arcára, és kezdje el a kezelést.
- Lassan mozgassa az arc körvonalai mentén, alulról kezdve, fokozatosan felfelé haladva.
- Ne feledje, hogy a spatulát lefelé, a pórusok irányával ellentétesen kell megdönteni.
- A kezelésnek körülbelül 10 percig kell tartania. Ha végzett, tisztítsa meg a bőrt, rakja fel hidegen a maszkot, majd tartsa arcát a gőzölőben 10 percig, vagy használjon meleg törülközőt. A kezelés után tisztítsa meg bőrét tiszta vízzel.

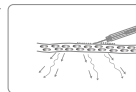


5. mód - Lifting (EMS):

- Alapvető használat esetén tisztítsa meg arcát gőzölővel, helyezzen fel meleg törülközőt 5 percre.
- Vigyen fel tápláló olajat az arcára, és kezdje el a kezelést.
- A mitesszerek eltávolításához vigye fel a krémet 10 percre.
- Lassan mozgassa az arc tisztítandó körvonalai mentén.
- Ne feledje, hogy a spatulát lefelé, a pórusok irányával ellentétesen kell megdönteni.
- A kezelésnek körülbelül 10 percig kell tartania. Ha végzett, tisztítsa meg bőrét tiszta vízzel.



Termékleírás

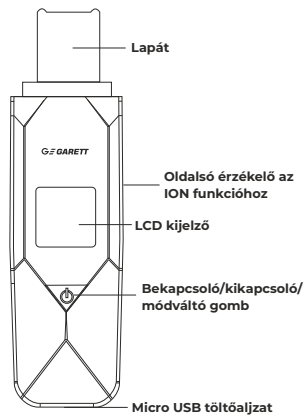

5



1. Ultrahangos tisztítás mód Light
2. Ultrahangos tisztítás mód High
3. Anion import
4. Kék fény
5. Pozitív ion export
6. Piros lámpa
7. EMS
8. Töltés visszajelző

Eszköz specifikáció

Termék megnevezése: Garett Beauty True Scrub	
Termék méretei: 170 x 45 x 21 mm	
Töltési mód: USB	A termék súlya (nettó): 90 g
Üzemi feszültség: 3,7 V	Akkumulátor-kapacitás: 450 mAh
Töltőfeszültség: 5 V	Töltési idő: 2 óra
Üzemidő: akár 4 nap	
Ultrahangos rezgések: 23 kHz	

6

Övintézkedések

1. Tartsa tisztán a terméket használat előtt és után.
2. Ne használja sebek, ekcéma vagy egyéb bőrproblémák esetén.
3. Ne használja a szem környékén.
4. A készüléket gyermekek nem használhatják.
5. Az üzemidő maximum 15 perc lehet. A készülék 15 perc elteltével nem kapcsol ki automatikusan.
6. A készüléket csak kikapcsolt állapotban szabad tisztítani.
7. Ne használja a készüléket töltés közben.
8. A termék nem vízálló, ne merítse vízbe.
9. Ne használja a készüléket fürdés közben.
10. Ne szerelje szét és ne javítsa a készüléket egyedül. Műszaki problémák esetén lépjen kapcsolatba az eladóval vagy közvetlenül a Garett szervizzel.
11. Töltéshez használja a mellékelt USB-kábelt, és győződjön meg arról, hogy a töltési feszültség megfelel a követelményeknek.

Ez az útmutató tartalmazza a termék használatára vonatkozó utasításokat. Használat előtt olvassa el, hogy elkerülje a nem megfelelő kezelés okozta károkat.

Tisztítás és karbantartás

1. Tartsa távol a készülékeket a nedvességtől.
2. Ne tegye mosogatógépbe vagy mikrohullámú sütőbe.
3. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
4. Ne tisztítsa a készüléket éles vagy maró hatású oldatokkal.
5. A készüléket puha törlőkendővel vagy vattával tisztítsa.
6. Ne mossa a készüléket vízbe merítve.

7

Jótállás / Reklamáció

A termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra: a felhasználó hibájából vagy nem megfelelő (nem rendeltetésszerű) használat következtében fellépett hibákra és sérülésekre, mechanikus sérülésekre és a készlethez mellékelttől eltérő kiegészítők és üzemeltetési anyagok használatából eredő károsodásokra. A termékkel kapcsolatos reklamáció benyújtása során ki kell tölteni az eszközhöz csatolt jótállási lapot és az eszközt a vásárlási bizonylattal együtt el kell küldeni a szervizbe, a jótállási lapon megadott címre.

A kapcsolattartási adatok megtalálhatók a honlapon:

www.garett.eu

Gyártó:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce
www.garett.eu



A termék megfelelő ártalmatlanítása (elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó hulladékkezelés).

A terméken vagy a rá vonatkozó szövegekben elhelyezett jelölés arra utal, hogy azt a használati időszak elmúltával nem szabad azt a háztartásból származó többi hulladékkal együtt eltávolítani. A hulladék nem ellenőrzött eltávolítása által a természeti környezetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatás elkerülése érdekében kérjük a terméket külön kezelni a más típusú hulladékoktól, és felelős újrahasznosítását az anyagi erőforrások újrafelhasználásának mint állandó gyakorlatnak a népszerűsítése érdekében. E termék a környezet számára biztonságos újrafeldolgozásának helyére és módjára vonatkozó tájékoztatást a háztartási felhasználók a kiskereskedelmi értékesítési helyen kaphatnak, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi hatóságoknál. A céges felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal és ellenőrizzék a vonatkozó feltételeket a vételi szerződésben. A terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékokkal együtt eltávolítani.



Készült a Kínai Népköztársaságban.

8